

EzDx^{VEDTM} 1 Pro 手持式实时核酸荧光定量检测仪

① 我们致力于为每个人提供便捷的诊断工具和服务

【产品介绍】

WeD-1 Pro 是基于 WeD-1 开发的手持式实时定量核酸检测仪，具有更专业的设计，可满足专业人士的需求。它配备了一个小型化的光学传感模块和 Wifi/蓝牙通信模块，可以进行实时定量分析并连接到 HIS/LIS 系统。

它与 LAMP、RPA、LAMP-CRISPR、RPA-CRISPR、LAMP-PfAgo 等等温检测方法兼容。

包装内容：WeD-1 Pro 手持式荧光检测仪、电源

产品规格：

- ① 电压：24V
- ① 功率：36W
- ① 尺寸：140 毫米*78.3 毫米*80.3 毫米
- ① 重量：290 克
- ① 加热温度范围：20-100°C
- ① 温度控制精度：0.5°C
- ① 工作温度：室温




YouTube 频道



领英



EzDx Technology
杭州逸检科技有限公司

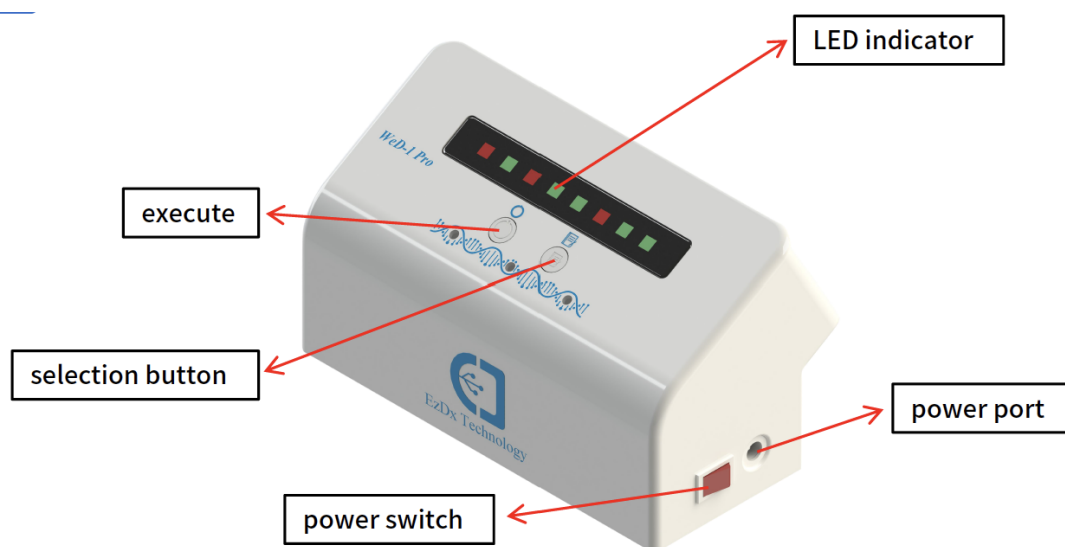

操作说明：

移动操作：

扫描二维码获取手机应用程序、微信小程序和操作视频教程：



安卓应用 i OS/macOS 应用 微信小程序 YouTube 教程视频

1. 插入电源，打开电源开关；LED 指示灯将依次点亮，设备进入待机模式，等待进一步的指令。
2. 通过蓝牙将设备连接到手机；将预设的反应程序从手机上传到设备。
3. 收到上传的程序后，设备将自动执行程序中指定的反应阶段、反应时间和反应温度。
4. 在反应过程中，LED 指示灯将显示与当前加热模块温度阈值相对应的颜色，并根据当前反应时间顺序点亮，向操作员指示进度。
5. 光学检测模块将实时连续收集反应数据，将其上传到手机和服务器（适用于 Wi-Fi 版本），并在手机上显示反应曲线。

- 反应后，内置程序将解释检测到的数据，结果将通过显示模块（指示灯）传达给操作员。阳性结果将显示红灯，阴性结果将显示绿灯。同时，手机将收到测试结果的反馈。

	试管A、E和H呈阳性，而其他试管呈阴性。
---	----------------------

- 点击生成报告将重定向到网页以生成 PDF 测试报告文档。下载的文档可以保存或打印。

按钮操作：

- 插入电源，打开电源开关；LED 指示灯将依次点亮，设备进入待机模式，等待进一步的指令。
- 利用设备上的按钮组件来操作实验。点击“选择按钮”可以在不同的内置反应程序之间切换，通常预设了常见的反应温度和时间（如下所列）。它包括等温反应，如重组酶聚合酶扩增（RPA）和环介导的等温扩增（LAMP）。用户还可以自定义他们常用的反应温度和时间，将它们与不同的 LED 指示器（紫色）相关联。

	39°C 30分钟		65°C 25分钟 95°C 20分钟
	45°C 30分钟		70°C 25分钟 95°C 20分钟
	63°C 35分钟		65°C 35分钟 95°C 30分钟
	65°C 30分钟		70°C 35分钟 95°C 30分钟

- 选择所需的反应程序后，单击“执行按钮”。
- 反应后，内置程序将解释检测到的数据，结果将通过显示模块（LED 指示灯）传达给操作员。阳性结果将显示红灯，阴性结果将显示绿灯。

指示灯说明：

- 待机状态：8 个白色灯持续亮起。
- 选择的反应程序：1 个紫色灯持续亮起。
- 反应进行中：橙色灯闪烁，表示反应进行中。反应温度越高，橙光越接近红光。
- 反应完成，检测结果为阳性：红灯持续亮起。
- 反应完成，检测结果为阴性：绿灯持续亮起。

*在仪器操作过程中，按住执行按钮可以停止反应。

*当设备保持通电状态时，连接到手机可以检索放大曲线。

通过应用程序修改 WED-1 操作参数（反应程序）：



EzDx Technology

杭州逸检科技有限公司

1. 打开移动应用程序（或微信小程序），搜索设备，然后连接。
2. 通过移动应用程序（或微信小程序）设置加热程序和结果解释阈值并保存。
3. 在“主页”界面点击“开始运行”，启动反应程序。

注意事项：

1. 本产品仅与标准 200 μ L PCR 试管兼容，不适合与 100 μ L PCR 管一起使用。
2. 建议避免使用蓝牙直接连接，而是使用推荐的应用程序或小程序与 WeD-1 Pro 设备连接。移动应用程序（或微信小程序）应保持蓝牙启用，并允许在使用过程中共享位置信息。
3. 阈值设置应根据手机上显示的 Tube 值确定。扩增曲线的相应值是基线后减去的，不应用于设置阈值。
4. 如果使用冻干试剂，请确保试剂完全溶解并充分混合。
5. 该产品的电源参数为：24V，3A。使用或更换电源适配器时，请确保使用相同规格的适配器，以避免影响正常运行或损坏产品。
6. 产品冷却是通过自然散热实现的，导致冷却速度较慢。如果进行多阶段等温反应，建议设计先执行较低温度阶段，然后执行较高温度阶段的实验。
7. 为避免烫伤，仪器运行时请勿触摸加热板。
8. 请勿在潮湿的环境中长时间操作或储存本产品。
9. 如果产品损坏，请联系制造商或其他合格的服务代理进行维修，以防止潜在危险。